

PROCEDIMIENTO DE REAMINACIÓN

1



¿Responde el paciente a los estímulos?

2




Llame a los servicios de urgencias.

3



Consiga un dispositivo DEA.

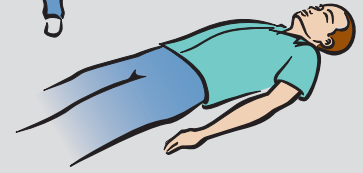

4



Coloque el DEA en el suelo.
Abra la tapa.

5



Retire la ropa al paciente.
Deje el pecho al descubierto.

6



Coloque los electrodos.

7



No toque al paciente.

8




Si fuera necesario,
el DEA administrará
una descarga automáticamente.

9



Coloque el dispositivo de RCP,
si dispone de uno.

10

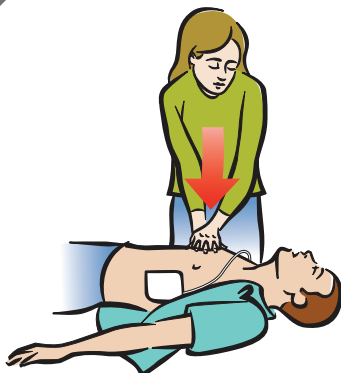

Siga las instrucciones del DEA.
Realice compresiones.

11



Si se le indica,
realice insuflaciones.

DEA automático



Cardiac Science y el logotipo del corazón blindado son marcas comerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012 Todos los derechos reservados.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 EE. UU.
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Alemania



70-01092-05rC

