

DURCHFÜHREN EINER REANIMATION

1



Reagiert der Patient?

2



Rufen Sie den Rettungsdienst!

3



AED holen.

4




AED am Boden abstellen.
Abdeckung öffnen.

5



Kleidung entfernen.
Brust freilegen.

6

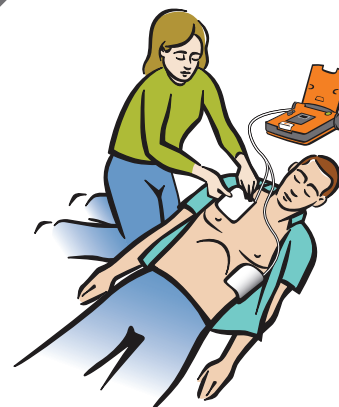

Elektroden anbringen.

7




Berühren Sie den Patienten
nicht während der Analyse.

8




Bei Bedarf gibt der AED
automatisch einen Schock ab.

9

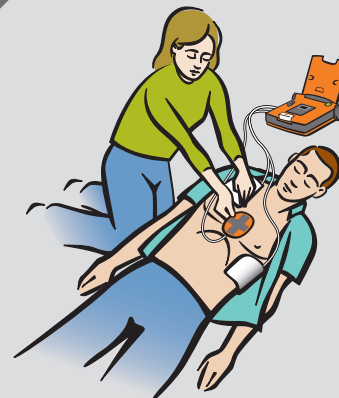

HLW-Gerät anbringen,
wenn vorhanden.

10

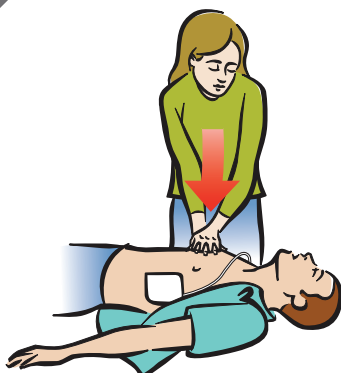

Anweisungen des
AED befolgen.
Kompressionen durchführen.

11



Bei Anweisung
Atemspenden geben.

Automatischer AED



Cardiac Science und das Shielded Heart-Logo sind Marken
der Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012 Alle Rechte vorbehalten.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-01092-84rB



ESECUZIONE DI UN INTERVENTO

1



Il paziente reagisce?

2




Chiamare il servizio di emergenza.

3



Recuperare il DAE.

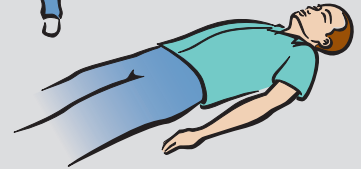

4



Appoggiare il DAE a terra. Aprire il coperchio.

5



Rimuovere gli indumenti. Esporre il torace.

6



Applicare gli elettrodi.

7



Non toccare il paziente.

8




Se richiesto, il DAE erogherà automaticamente una scarica.

9



Se presente, posizionare il dispositivo per RCP.

10

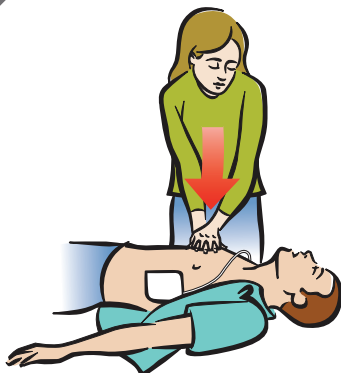

Seguire i messaggi del DAE. Eseguire le compressioni.

11



Se richiesto, dare i respiri.

DEA automatico



Cardiac Science e il logo Shielded Heart sono marchi di Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012 Tutti i diritti riservati.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germania



70-01092-84rB

